

ELLE

by
beurer

MPE 50

RUS



RUS **Прибор для удаления роговлицы**
Инструкция по применению 2-7

Уважаемый покупатель,

благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для измерения массы, артериального давления, температуры тела, пульса, для легкой терапии, массажа, косметического ухода, ухода за детьми и очистки воздуха.

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраняйте ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer

Комплект поставки

- Основной блок
- Насадка для удаления мозолей, жесткая
- Насадка для удаления мозолей, мягкая
- Защитный колпачок
- Зарядное устройство
- Сетевой адаптер
- Щетка для очистки
- Данная инструкция по применению

Пояснения к символам

В инструкции по применению и на заводской табличке используются следующие символы:



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.



ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/принадлежностей.



Указание Отмечает важную информацию.



Указание Подходит для очистки под проточной водой.



Прибор имеет двойную защитную изоляцию и соответствует классу защиты 2.



Применяйте только в закрытых помещениях.

1. Использование по назначению

С помощью этого прибора Вы можете быстро, легко и эффективно удалить мозоли и загрубевшую кожу.

В комплект поставки входят одна жесткая и одна мягкая насадка для удаления мозолей, что позволяет оптимально обработать необходимые области.

Допускается использование прибора только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

Прибор предназначен для использования в домашних условиях, использование в коммерческих целях запрещено. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными

знаниями или опытом, за исключением случаев, если за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили инструкции по использованию прибора.

Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте их без присмотра.

2. Указания по технике безопасности

Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение нижеследующих указаний может привести к материальному ущербу или травмированию людей. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, доступном для других пользователей. Передавайте прибор другим пользователям вместе с инструкцией по применению.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не давайте упаковочный материал детям. Опасность удушья.
- Дети должны пользоваться прибором только под надзором взрослых.



ВНИМАНИЕ

- Перед использованием убедитесь в том, что прибор и его принадлежности не имеют видимых повреждений. При возникновении сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы.
- Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте электрический кабель.
- Следите за тем, чтобы кабель не укладывался на острые предметы и не проводился через них.
- Вставляйте сетевой адаптер только в розетку, установленную в соответствии с предписаниями.
- Ни при каких обстоятельствах не открывайте корпус.
- Не помещайте прибор рядом с острыми предметами.
- Если прибор упал или получил иные повреждения, запрещается использовать его далее.
- После каждого применения или перед очисткой прибор необходимо отключать.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удар электрическим током

Во избежание поражения электрическим током используйте данный прибор осторожно и аккуратно, как и любой другой электрический прибор.

Поэтому

- эксплуатируйте прибор только с входящим в комплект поставки сетевым адаптером и только при напряжении, указанном на блоке питания,
- никогда не используйте прибор, если на нем или на принадлежностях имеются видимые повреждения,
- не используйте прибор во время грозы.

В случае появления дефектов и неполадок в работе немедленно отключите прибор и отсоедините его от сети. Никогда не тяните за сетевой кабель или за прибор, чтобы вынуть блок питания из розетки. Никогда не держите прибор за сетевой кабель и не переносите его таким образом. Кабели должны находиться на надлежащем расстоянии от горячих поверхностей.

Убедитесь, что зарядное устройство, штекер и кабель не контактируют с водой или другими жидкостями.

Поэтому используйте зарядное устройство только при соблюдении следующих условий:

- только в сухих помещениях,
- только сухими руками,
- не в ванне, в душе или рядом с наполненной умывальной раковиной,
- не в бассейне, джакузи или сауне,
- не на открытом воздухе.

Ни в коем случае не прикасайтесь к зарядному устройству, если оно упало в воду. Немедленно выньте штекер из розетки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ремонт прибора

• Ремонт электрических приборов должен производиться только специалистами. Результат неквалифицированного выполнения ремонтных работ может представлять значительную опасность для пользователя.

В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в специализированную мастерскую.

• При повреждении сетевого адаптера его необходимо заменить, обратившись к авторизованному торговому представителю. Новый адаптер платная услуга.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Опасность пожара

Использование прибора не по назначению или в целях, не указанных в данной инструкции, при определенных обстоятельствах может привести к пожару!

Поэтому

- не оставляйте включенный прибор без надзора, в особенности если рядом находятся дети,
- не накрывайте работающий прибор, например, одеялом, подушкой и т. п.,
- не помещайте прибор вблизи емкостей с бензином или рядом с другими легко воспламеняющимися веществами.



Примечание: Утилизация


Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов. Утилизируйте прибор в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/EC по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Перед тем как сдать прибор в соответствующий пункт вторичной переработки, извлеките из него аккумуляторную батарейку. Для этого извлеките прибор из зарядного устройства и дождитесь полной остановки мотора. Снимите передние крышки с помощью отвертки и открутите расположенные под ними винты. Извлеките аккумуляторную батарейку. Сдайте использованный аккумулятор в пункт сбора вторсырья.

3. Описание прибора

1. Основной блок
2. Подставка
3. Насадка для удаления мозолей, жесткая
4. Насадка для удаления мозолей, мягкая
5. Кнопка разблокировки
6. Фиксирующий колпачок
7. Светодиодная лампочка
8. Индикация контроля зарядки
9. Выключатель с двумя уровнями скорости
10. Защитный колпачок

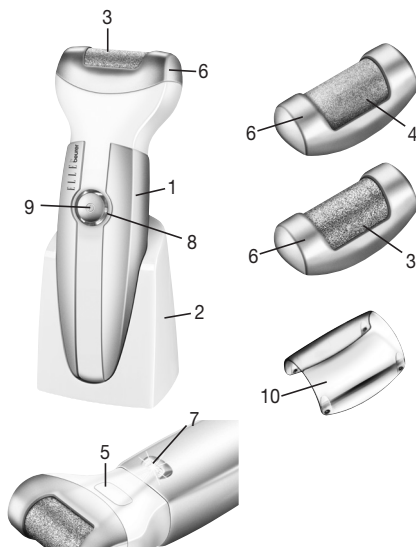

4. Подготовка к работе

- Распакуйте прибор.
- Убедитесь в том, что прибор, штекер и кабель не повреждены.
- Подключите прибор к электросети. Прибор должен находиться в выключенном состоянии.
- Проложите кабель так, чтобы об него нельзя было споткнуться.
- Перед первым использованием заряжайте прибор в течение двух часов. Медленное мигание индикатора контроля зарядки означает, что аккумулятор заряжается. По окончании зарядки индикатор горит постоянно. Теперь прибор может работать от аккумуляторной батарейки или от сети (сетевой кабель).
- Быстрое мигание индикатора контроля зарядки при работе от аккумуляторной батарейки означает, что аккумулятор разрядился. Для зарядки прибора вставьте его в зарядную станцию или подключите к сетевому адаптеру.
- Заряда аккумуляторной батарейки хватает на 30 минут беспроводного режима работы. После этого прибор может работать от сети.



ВНИМАНИЕ

- Из гигиенических соображений данными насадками может пользоваться только один человек.
- Во избежание травм, блокировки или повреждения прибора включенный прибор не должен соприкасаться с другими участками кожи (например, с ресницами, волосами на голове и т. д.), одеждой и шнурами.
- При наличии раздражения кожи, варикозных вен, сыпи, прыщей, родинок (с волосками) или ран следует использовать прибор только после предварительной консультации с врачом. Это также относится к пациентам с ослабленным иммунитетом, диабетом, гемофилией и иммунной недостаточностью.



Указание

- В начале использования аккумуляторные батарейки не достигают полной зарядной емкости. Для достижения полной зарядной емкости аккумуляторных батареек их необходимо полностью зарядить перед первым включением прибора. Перед следующей зарядкой их нужно полностью разрядить, а затем вновь полностью зарядить. Для увеличения срока службы аккумуляторных батареек необходимо повторять этот процесс зарядки и разрядки как можно чаще.
- Прибор для удаления мозолей можно использовать как на сухой, так и на влажной коже. Удаление мозолей на сухой коже более эффективно.
- При использовании прибора на сухой коже она должна быть сухой и свободной от жировых загрязнений.
- Перед удалением мозолей не пользуйтесь кремом.
- Не удаляйте слишком много ороговевшей кожи — в этом случае может появиться еще более крупная мозоль.

5. Применение

- Для включения прибора нажмите выключатель.
- При повторном нажатии выключателя скорость повышается. Встроенная светодиодная лампочка обеспечивает оптимальное освещение. Благодаря этому Вы можете лучше видеть мозоль, чтобы было проще ее удалить.
- Медленно и плавно водите прибором по мозоли. Держите прибор вертикально под углом 90° к поверхности мозоли. Чтобы достичь оптимального результата, можно водить прибором по поверхности мозоли в разных направлениях.

Замена насадок

- Для смены насадки нажмите кнопку разблокировки и снимите насадку с прибора. Для отсоединения фиксирующего колпачка от насадки надавите на крепежный элемент в направлении наружу.
- При повторной установке фиксирующего колпачка или насадки для удаления мозолей ориентируйтесь по разметке.
- Стрелки на насадке и фиксирующем колпачке должны указывать в одинаковом направлении.
- Если Вы хотите удалить крупные мозоли, используйте жесткую насадку.
- Если Вы хотите удалить небольшие мозоли или хотите просто сделать кожу более гладкой, используйте мягкую насадку.

6. Уход и хранение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Очищайте прибор только указанным способом. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора или принадлежностей.
- Очищайте насадки для удаления мозолей щеткой для очистки. Из гигиенических соображений рекомендуется предварительно смочить щетку спиртом. Очищайте насадки щеткой сзади, вручную поворачивая валик.
- Перед установкой насадки для удаления мозолей на прибор убедитесь в том, что она полностью высохла.
- Используйте прибор снова только после того, как он полностью высохнет.
- Не мойте прибор в посудомоечной машине!
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие щетки!

Протрите отключенный от сети и остывший прибор мягкой салфеткой, слегка смоченной мягким чистящим средством. Затем вытрите прибор насухо мягкой безворсовой тканью.

7. Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу

Запасные детали и детали, подверженные быстрому износу, можно приобрести в соответствующих сервисных центрах (согласно списку сервисных центров). Укажите соответствующий номер для заказа.

Запасная деталь	Артикульный номер или номер для заказа
Насадка для удаления мозолей, мягкая, с фиксирующим колпачком	163.280
Насадка для удаления мозолей, жесткая, с фиксирующим колпачком	163.281

8. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (зарядные устройства, насадки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: маникюрно-педикюрный набор ООО «Гарантия»

№РОСС DE .АГ 93.В00740 срок действия с 10.04.2012 по 09.04.2015 гг.

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218

89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО Бойер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

